

Introduction of Naton Personal Protective Equipment

纳通社科奖产品介绍

Certification

资质证书



非医用口罩

简介

随着疫情逐渐缓和与防疫相关物资的产能提高，消费者眼中的口罩也从一罩难求，转变成精心挑选，择优购买的市场，从价格，样式与功能多方面的去挑选口罩。为了迎合广大消费者的消费观念，制作并上市了18款口罩，主要种类有夏季清凉口罩、抗菌口罩等。非医用口罩在追求防护效果的同时，把透气性、科技感、环保、美观等诸多因素也融入其中，每款口罩都有独特的亮点。



公司资质 (天津防护)

统一社会信用代码
91120118MA0705KXA4
(2-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码
下载电子证照
国家企业信用信息公示系统
网址: www.gsxt.gov.cn

名称
纳通医用防护器材(天津)有限公司

类型
有限责任公司(法人独资)

法定代表人
赵立岩

经营范围
许可项目: 医用口罩生产; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 医用口罩零售; 医用口罩制造; 第一类医疗器械生产; 日用口罩(非医用)销售; 日用口罩(非医用)生产; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本
伍仟万元人民币

成立日期
二〇二〇年四月十四日

营业期限
2020年04月14日至2070年04月13日

住所
天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层230室

登记机关
天津自贸试验区(空港经济区)市场监督管理局

2020年04月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局制

医疗器械生产许可证

许可证编号: 津食药监械生产许20200005号

企业名称: 纳通医用防护器材(天津)有限公司

生产地址: 天津空港经济区经一路296号2号厂房

法定代表人: 赵立岩

生产范围: 2017年分类目录: II类: 14-14医护人员防护用品

企业负责人: 王文义

住所: 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层230室

发证部门: 天津市药品监督管理局

有效期限: 至 2025 年 06 月 30 日 发证日期: 2020 年 07 月 0日

国家药品监督管理局制

防护口罩

PP34095



产品性能指标

- 高效熔喷布，PFE $\geq$ 95%，抵御灰尘、花粉、PM2.5、流感病毒等病原微生物以及工业加工产生的颗粒物立体船型结构，面部贴合全面防护；
- 专利双峰设计，贴合鼻型，密合性更佳；
- 内置骨材，外形立体，具有瘦脸效果



贴心细节设计

- 颈带式的佩戴方式解放双耳压力
- 采用可调节挂钩设计，适应不同脸型
- 内层采用亲肤吸湿无纺布，降低潮湿！
- 独立包装设计，携带方便安全卫生

点击二维码或微信扫码观看
船型口罩佩戴说明





检验报告 (中文)

		
天纺标检测认证股份有限公司 TianFongBiao Standardization Certification & Test Co., Ltd.		
国家服装质量监督检验中心 (天津) National Center for Textile and Apparel Quality Supervision and Inspection (Tianjin)		
国家纤维产品质量监督检验中心		
 1715 96 921013778		第 1 页 共 4 页 Page 1 of 4
委托单位/地址 Applicant	纳通医用防护用品 (天津) 有限公司 Naton Medical Protective Equipment (Tianjin) Co., Ltd. 天津自贸试验区 (空港经济区) 空港国际物流区第一大街2号(2) 综合楼二-203室 Room 230, 2nd Floor, Comprehensive Building No. 2, 212(F1 First Street, Airport International Logistics Zone, Pilot Free Trade Zone(Airport Economic Zone), Tianjin, 300080, China.	送样人: Contact / 电话 Tel. /
生产单位/地址 Manufacturer	纳通医用防护用品 (天津) 有限公司 Naton Medical Protective Equipment (Tianjin) Co., Ltd. 天津自贸试验区 (空港经济区) 空港国际物流区第一大街2号(2) 综合楼二-203室 Room 230, 2nd Floor, Comprehensive Building No. 2, 212(F1 First Street, Airport International Logistics Zone, Pilot Free Trade Zone(Airport Economic Zone), Tianjin, 300080, China.	
样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name 防护用品 防护口罩 Sample Size: 42个 Sample Weight: 42 Piece(s) 型号规格: Size K305 LF 质量等级: Quality Grade 产品款号或货号: Product No.: 2102191001 Style No. or Order No.	商标: Trademark 颜色: Color 安全类别: Safety Category
判定标准: Test Standards	GB 26169-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 Respiratory protection-Non-powered air-purifying particle respirator	
样品描述 Test Part Description	IF 白色口罩 White Mask	检测日期 Date of Test 2021-02-22 检测地点 Place of Test 天津自贸试验区 Tianjin
检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品接收日期 Date of Sample Reception 2021-02-22
检验日期 Test Date	2021-02-24	到 到
供方承诺 Test Standards	见网页 See test page(s)	检测合格符合性见网页。 Test results and compliance refer to next page(s).
检验结论 Conclusion	检验合格符合性见网页。 Test results and compliance refer to next page(s).	检验单位章 Stamp of Inspection Unit
备注 Remarks		

天津标检测认证股份有限公司 Tianjin Beifang Certification & Testing Co., Ltd. National Center Quality Inspection & Examination Center 国家质检中心质量监督检查中心（天津） National Center Product Quality Inspection & Examination Center						检验检测报告 Test Report		
TTS-WT-21013778						第3页 共4页 Page 3 of 4		
检测项目 Test Item	项目描述 Description	单位 Unit	标准 Standard	要求值 Requirement	实测值 Result	评价 Conclusion	备注 Remarks	
1#	白色口罩 White Mask							
以每个动作的 TIL 为评价依据时，50个动作中至少有 45 个动作的 TIL<=11% 以人的总体 TIL 为评价依据时，10个受试者中至少有一个人的总体 TIL<=8% Based on the evaluation of TIL for each action, at least 46 of the 50 actions, the TIL is less than 11%. Based on the evaluation of TIL for total person being tested, the total TIL is less than 8%.		受试者 Tester 未接触处理 Without treatment 接触处理 With treatment		D1 (N1) D2 (N2) D3 (N3) D4 (N4) D5 (N5) D6 (N6)		TIL (N1) TIL (N2) TIL (N3) TIL (N4) TIL (N5) TIL (N6)		
				1 2.2 2.7 3.1 3.1 2.6 2.5 2.6 2 2.4 3.1 3.3 3.9 4.0 3.3 3 3.2 2.9 2.6 3.6 2.7 2.9 4 4.3 3.7 3.8 4.8 3.9 3.9 5 4.1 3.9 3.3 3.6 4.0 3.8 6 5.4 5.1 5.1 5.9 4.9 5.7 5.8 7 5.6 6.4 5.7 5.9 6.0 5.9 8 6.4 5.9 6.6 6.2 6.4 6.3 9 5.8 6.1 5.5 5.7 5.4 5.7 10 6.6 7.2 6.1 7.7 7.4 7.4				
源属性 Leakage (KN95)	/	/				符合 Pass	GB 2626-2019	

天纺标检测认证股份有限公司

Tianfangbiao (Shanghai) Inspection, Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Garment Quality Supervision & Inspection Center (Tianjin)

国家纺织品质量监督检验中心

National Textile Quality Supervision & Inspection Center

检验检测报告

Test Report

第2页 共4页

Page 2 of 4

TTS-WT21013778

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusion	检测方法 Test Method/Remarks
1# 白色口罩 White Mask						
呼吸阻力 Resistance	呼气阻力 Expiratory Resistance	Pa	≤210	未提供样品 Samples Without Pre-treatment 1: 152 2: 147	符合 Pass	GB 2626-2019
	吸气阻力 Inspiratory Resistance	Pa	≤210	未提供样品 Samples Without Pre-treatment 1: 158 2: 154		
	过滤效率 Filtration Efficiency	%	≥95.0	未提供样品 Samples With Pre-treatment 1: 133 2: 147		
过油效率 Filtration Efficiency	氯化钠颗粒物 NaCl Particle	%	≥95.0	加载过滤效率 Loading Filtration Efficiency 未提供样品 Samples Without Pre-treatment 1: 99.55 2: 99.84 3: 99.66 4: 99.74 5: 99.83 6: 99.94 7: 99.73 8: 99.84 9: 99.54 10: 99.92 11: 99.70 12: 99.65 13: 99.90 14: 99.73 15: 99.77	符合 Pass	GB 2626-2019
				未提供样品 Samples With Pre-treatment 1: 99.02 2: 99.25 3: 99.63 4: 98.91 5: 98.96		

 天纺棉检测认证股份有限公司 TianFangBao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量监督检验中心 (天津) National Clothing Quality Supervision & Inspection Certification Center 国家针织产品质量监督检验中心 National Knit Product Quality Supervision & Inspection Center	    	 	检验检测报告 Test Report
第4页 共4页 Page 4 of 4			
样 品 Sample			
			



一次性使用护理口罩

PH29001



适用范围

- 适用于日常佩戴
- 防细菌、防灰尘、防沙尘、防花粉、防喷溅

产品性能优势


- 细菌过滤效率 (BFE) $\geq 95\%$
- 非油性颗粒过滤效率 (PFE) $\geq 80\%$;
- 通气阻力 $\leq 80\text{Pa}$
- 十万级洁净间生产, 品质有保障

贴心细节设计

- 高弹耳带绳, 长时间佩戴不勒耳朵
- 可塑鼻梁条, 随意调节贴合鼻翼两侧



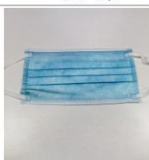

 天津特检研究院股份有限公司 Tianjin Tetsu Kenkyu Gakkaishi Co., Ltd. (天津特检) 国家质量监督检验检疫中心 (天津) 国家材料产品质量监督检验中心	   	  检验检测报告 Test Report
第3页 共3页 Page 3 of 3		
样品 Sample		
		



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)
National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心
National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center









第2页 共3页
Page 2 of 3

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	执行标准/备注 Test Method/Remarks
1# 蓝色口罩 Blue Mask						
细菌过滤效率 (BFE) Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	/	%	≥95	1: 99.96 2: 99.96 3: 99.69	符合 Pass	YY 0469-2011
颗粒过滤效率 (PFE) Particle Filtration Efficiency (PFE)	/	%	≥80	1: 96.94 2: 96.50 3: 96.33	符合 Pass	YY 0469-2011
通气阻力 Airflow Resistance	/	Pa	≤80	24	符合 Pass	YY 0469-2011



安泰百克™

一次性抗菌口罩

PH29007



产品性能指标

- 使用抗菌性能的创新无纺布料，有效抑制微生物生长，长时间佩戴舒适无异味
- 高效过滤熔喷层，细菌过滤效率超医用外科要求
- 呼气阻力不高于40Pa，畅快呼吸

贴心细节设计

- 升级6mm亲肤高弹耳带绳，长时间佩戴不勒耳朵
- 专利弧形花齿设计，佩戴更贴合
- 独立包装，环保卫生，携带方便

★ 是一款高效、长效、安全抗菌的口罩。







夏季清凉口罩

耳挂式A-7-a/A-7-b



产品性能指标

- 薄透大网孔表层，轻薄透气/轻薄细织纱表层，细腻柔滑
- 高效过滤熔喷层，细菌过滤效率超医用外科要求
- 亲柔内层无纺布，舒适亲肤
- 呼气阻力不高于40Pa，畅快呼吸

贴心细节设计

- 高弹耳带绳，可长时间佩戴，不勒耳朵
- 可塑鼻梁条，随意调节贴合鼻翼两侧

★ 轻薄、透气、柔软，更适合夏季佩戴的口罩





纳通

检验报告 (中文)

天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告

CTTT-WT20016620



第1页 共3页

客户 提供 信息	委托单位/地址	纳通医用防护器材(天津)有限公司 天津空港经济区经一路296号2号厂房二层			送样人: 魏小新 电话: ---	
	生产单位/地址	纳通医用防护器材(天津)有限公司 天津空港经济区经一路296号2号厂房二层				
	样品信息	样品名称:	夏季清凉口罩	商标:	-----	
		样品总数:	70个			
		号型规格:	耳挂式A-7-b	颜色:	-----	
质量等级:		-----	安全类别:	-----		
	产品款号或货号:	-----				
	样品描述	1# 白色口罩				
	检验性质	委托检验	样品受理日期	2020-06-17	报告签发日期	2020-06-24
	执行标准	GB/T 32610-2016 YY 0469-2011				
	检验结论	检验结果及符合性见附页。				
	非标准检验方法说明	-----				
	检验结果的不确定度	-----				
	备注	企业要求按照Q/12 NT 0003-2020 非医用口罩 标准判定。				

批准: 方倩 审核: 张永 编制: 张永

天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告

CTTT-WT20016620

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	方法标准/备注
1# 白色口罩						
口罩带*	---	---	口罩应戴取方便	+	符合	Q/12 NT 0003-2020
通气阻力	---	Pa	≤49	24	符合	YY 0469-2011
细菌过滤效率(BFE)	---	%	≥99	1: 99.91 2: 99.58 3: 99.91	符合	YY 0469-2011
颗粒过滤效率(PFE)	非油性颗粒	%	≥80	1: 97.00 2: 97.36 3: 97.20	符合	YY 0469-2011
尺寸*	---	---	长度: 17.5cm 允差±10mm 宽度: 9.5cm 允差±10mm	长度: 173.0mm -2mm 宽度: 93.0mm -2mm	符合	Q/12 NT 0003-2020
外观*	---	---	口罩表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷	+	符合	Q/12 NT 0003-2020
鼻夹*	---	---	非医用口罩和夏季清凉口罩应配有鼻夹,鼻夹应具有可塑性。	+	符合	Q/12 NT 0003-2020
吸气阻力	---	Pa	≤175	未预处理样品 1: 69 2: 73 预处理样品 1: 56 2: 61	符合	GB/T 32610-2016
呼气阻力	---	Pa	≤145	未预处理样品 1: 48 2: 50 预处理样品 1: 42 2: 50	符合	GB/T 32610-2016

表中“+”为符合标准要求,“×”表示不符合标准要求。
*表示未在CNAS、CMA、CAL授权范围内。

以下空白

薄透纳米口罩

耳挂式A-8



产品性能指标

- 纳米纤维膜过滤材料替代传统的熔喷布
- 细菌过滤效率 (BFE) $\geq 99\%$, 完全满足YY0469医用外科级别的过滤效率要求
- 非油性颗粒物过滤效率(PFE) $\geq 90\%$
- 过滤不靠静电吸附, 潮湿环境下, 防护效率不打折

贴心细节设计

- 每只独立装, 干净卫生, 携带方便
- 高弹耳带绳, 长时间佩戴不勒耳朵
- 可塑鼻梁条, 随意调节贴合鼻翼两侧

★ 高过滤效率的可透视纳米口罩



检验报告
(中文)

天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告

CTTT-WT20016616



第1页 共3页

客户提供信息	委托单位/地址	纳通医用防护器材(天津)有限公司 天津空港经济区经一路296号2号厂房二层			送样人:	魏小新
	生产单位/地址	纳通医用防护器材(天津)有限公司 天津空港经济区经一路296号2号厂房二层			电话:	---
	样品信息	样品名称:	薄透纳米口罩	商标:	-----	
		样品总数:	70个			
		型号规格:	耳挂式A-8	颜色:	-----	
质量等级:		-----	安全类别:	-----		
	产品款号或货号:	-----				
样品描述	1# 白色口罩					
检验性质	委托检验	样品受理日期	2020-06-17	报告签发日期	2020-06-24	
执行标准	YY 0469-2011					
检验结论	检验结果及符合性见附页。					
非标准检验方法说明	-----					
检验结果的不确定度	-----					
备注	企业要求按照Q/12 NT 0004-2020 薄透纳米口罩 标准判定。					

批准: 方倩 审核: 张强 编制: 张强

天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告

CTTT-WT20016616

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	方法标准/备注
1# 白色口罩						
口罩带*	---	---	口罩应佩戴方便	+	符合	Q/12 NT 0004-2020
通气阻力	---	Pa	≤49	28	符合	YY 0469-2011
细菌过滤效率(BFE)	---	%	≥99	1: 99.95 2: 99.86 3: 99.91	符合	YY 0469-2011
颗粒过滤效率(PFE)	非油性颗粒	%	≥90	1: 92.41 2: 92.24 3: 91.78	符合	YY 0469-2011
尺寸*	---	---	长度: 17.5cm 允差±10mm 宽度: 9.5cm 允差±10mm	长度: 171.0mm -4mm 宽度: 94.0mm -1mm	符合	Q/12 NT 0004-2020
外观*	---	---	口罩表面不应有破损、油污、污渍、变形及其他明显的缺陷	+	符合	Q/12 NT 0004-2020
鼻夹*	---	---	非医用口罩和夏季清凉口罩应配有鼻夹,鼻夹应具有可塑性。	+	符合	Q/12 NT 0004-2020

表中“+”为符合标准要求,“×”表示不符合标准要求。

*表示未在CNAS、CMA、CAL授权范围内。

以下空白



个性印花口罩

—国风节庆版

PH29001



产品性能指标

- 表层采用的印花无纺布，新颖美观
- 高效过滤熔喷层，细菌过滤效率超医用外科要求
- 采用低阻的熔喷布材料，通气阻力 $\leq 40\text{pa}$ ，畅快呼吸

贴心细节设计

- 高弹耳带绳，长时间佩戴不勒耳朵
- 可塑鼻梁条，随意调节贴合鼻翼两侧

★ 适合用于党庆节日的口罩



检验报告 (中文)



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

国家针织产品质量监督检验中心



T T T S - W T 2 0 2 4 6 1 5 0



检验检测报告

Test Report

第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	纳通医用防护器材(天津)有限公司			送样人:	/
		天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层230室			电话:	/
	生产单位/地址	纳通医用防护器材(天津)有限公司				
		天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层230室				
	样品信息	样品名称:	个性印花口罩	商标:	/	
	样品总数:	50个				
	型号规格:	PH29001 17.5cmx9.5cm ±5%	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	/		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	Q/12 NT 0007-2020 个性印花口罩				
样品描述	1# 白色印花口罩					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2020-09-21	报告发布日期	2020-09-24	
检验日期	2020-09-21			至	2020-09-24	
执行标准	见附页					
检验结论	检验结果及符合性见附页。					
备注	何处签字领域:微生物检测项目;单字雷签字领域:除微生物检测项目以外的全部检测项目					

检测:

李亚娟

审核:

吴春美

编制:

张雯



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

国家针织产品质量监督检验中心



T T T S - W T 2 0 2 4 6 1 5 0

检验检测报告

Test Report

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 白色印花口罩						
细菌过滤效率(BFE)	/	%	≥99	1: 99.95 2: 99.90 3: 99.90	符合	YY 0469-2011
颗粒过滤效率(PFE)	/	%	≥85	1: 97.43 2: 97.49 3: 97.54	符合	YY 0469-2011
通气阻力	/	Pa	≤40	24	符合	YY 0469-2011
尺寸	/	/	长度: 175mm 允差±10mm 宽度: 95mm 允差±10mm	长度: 172.0mm -3.0mm 宽度: 94.0mm -1.0mm	符合	Q/12 NT 0007-2020*
外观	/	/	口罩表面不应有破洞、油污、污渍、变形及其他明显的缺陷。	+	符合	Q/12 NT 0007-2020*
鼻夹	/	/	个性印花口罩应配有鼻夹,鼻夹应具有可塑性。	+	符合	Q/12 NT 0007-2020*

表中“+”为符合标准要求,“×”表示不符合标准要求。

“*”表示不在CNAS、CMA、CAL授权范围内。



纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

和义广业 成人成己